



INSTRUCTIONS RAPIDES



Version 1.0


COMMANDES

Instruction

Date:

Name:

Seen

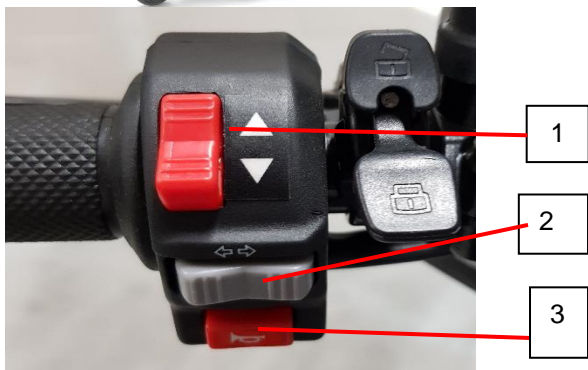

Commandes poignée gauche

- 1 - Commutateur marche avant / arrière
- 2 - Clignotants
- 3 - Klaxon




Commandes poignée Droite

- 4 - Commutateur alimentation / urgence
- 5 - Commutateur son de conduite on / off
- 6 - Bouton Start / Stop



Poignée gauche

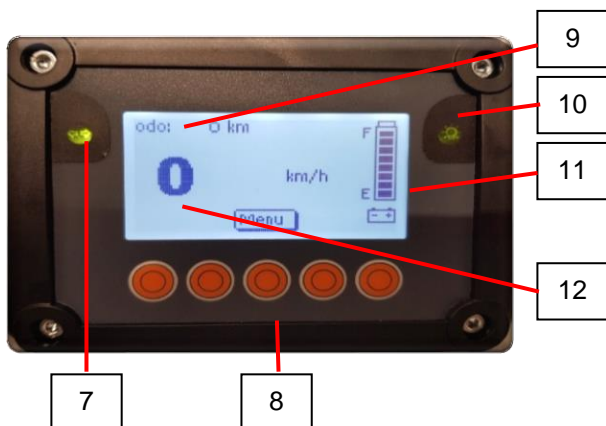

Poignée droite

- 7. Indicateur de direction
- 8. Boutons poussoir
- 9. Total km parcourus / compteur km
- 10. Indicateur de lumieres
- 11. indicateur de charge de la Batterie
- 12. Vitesse

*** Attention !!!** Toujours laisser la gâchette de libération du frein moteur en position déverrouillée. Utilisez la gâchette de libération en position verrouillé seulement en cas d'urgence et de panne électrique afin de débloquent le frein moteur et évacuer le véhicule. Ne conduisez jamais avec un frein libéré manuellement, cela peut endommager le frein et le moteur

Démarrer

- 1 - Positionnez-vous sur le Virto2
- 2 - Commutateur d'alimentation (4) sur ON.
- 3 - Appuyer sur le bouton START (6).
- 4 - Déverrouiller le Virto2 avec le mot de passe ou la clef Bluetooth.

Conduite

- 1 - Garder vos deux mains sur le guidon
- 2 - Accélérer lentement à la vitesse désirée.
- 3 - Prenez les virages à la vitesse appropriée.

Stationnement

- 1 - Parquer le Virto2 sur du plat.
- 2 - Eteindre le Virto2 commutateur (6) STOP.
- 3 - Commutateur d'alimentation (4) sur OFF.



Charge maxi sur le Virto2 est de 125 kg conducteur inclus.
Poids maxi compartiment bagages et porte bagages est de 15 kg.




En cas d'urgence vous pouvez appuyer sur le commutateur d'alimentation (4) tout en conduisant, le Virto2 s'immobilise et le frein moteur s'active.
Attention !!! Cette action est seulement conseillée en cas d'urgence.



Ne pas conduire dans les flaques d'eau et éviter les montées de + 10%.
Évitez les obstacles qui pourraient endommager le Virto2.

Mise en charge de la batterie

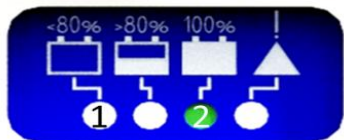

Branchement du chargeur

1. Comutateur d'alimentation (4) sur OFF
2. Connectez-vous au réseau le voyant LED-1 Orange s'allume
3. Connectez-vous au Virto2 prise A

(Déconnecter dans l'ordre inverse)

Voyants LEDS

LED 1– Orange – Connection au reseau
LED 1– Orange – En charge
LED 2– Vert – Chargement complet



Lorsque l'indicateur de batterie ne montre que 2 lignes, il doit être chargé au plus vite. Ne continuez pas à conduire jusqu'à ce que le Virto2 s'éteigne automatiquement, car cela peut endommager les batteries.



Chargez le Virto2 seulement qu'avec le chargeur de batterie fourni.