




## C3 Controller

Deze manual legt uit hoe een parameter in de C3 controller van de Virto2 gewijzigd kan worden.

### PC op C3 controller aansluiten

Sluit de programmeerkabel aan op de poort van de C3 controller (1) en de USB zijde op de PC (2).

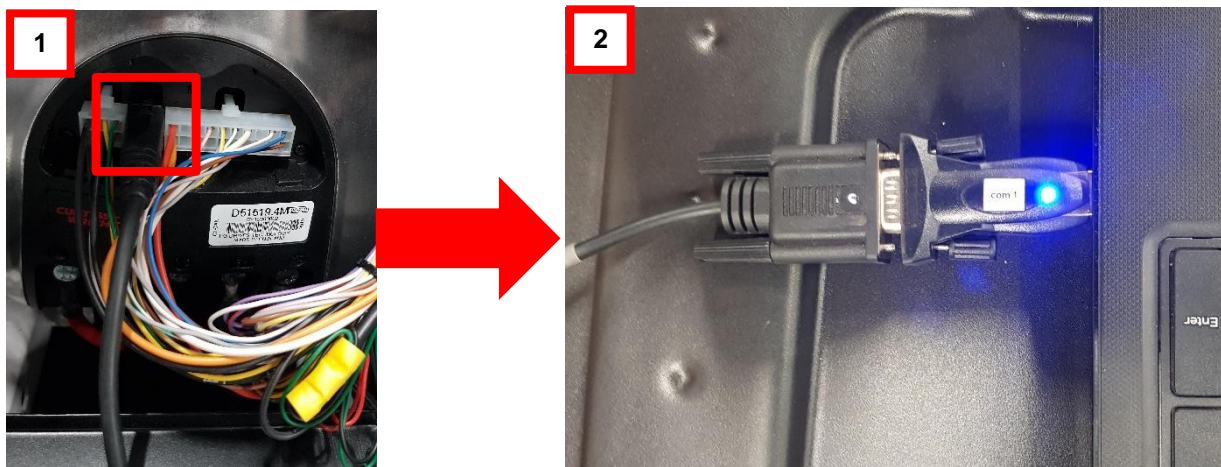


Start de Virto2 op, zodat de C3 controller aan staat.

### Parameters wijzigen in C3 controller

Open het C3 programma op de PC




Lees de C3 controller van de Virto2 uit.

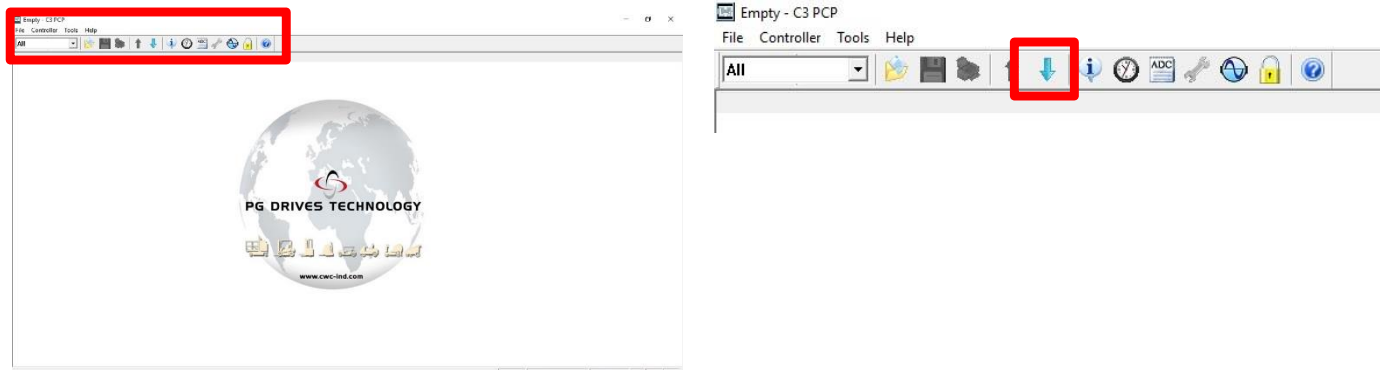




De voorgeprogrammeerde parameters komen tevoorschijn.

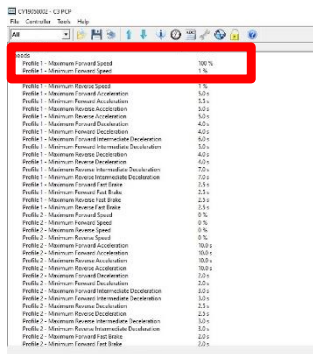


Parameter	Value
<b>Speeds</b>	
Profile 1 - Maximum Forward Speed	100 %
Profile 1 - Minimum Forward Speed	1 %

Dubbelklik op de te wijzigen parameter. Stel een nieuwe waarde in en klik op Update Editor om de gewijzigde waarde te behouden.

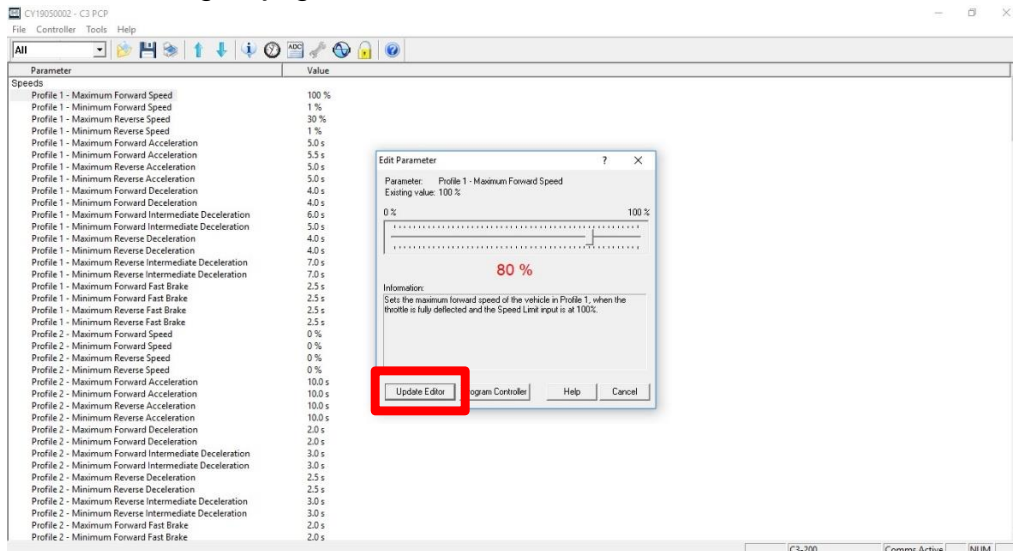

Om de nieuw ingestelde waarde op de C3 controller te updaten, klik op schrijven naar controller en laat vervolgens de oude waarde overschrijven.

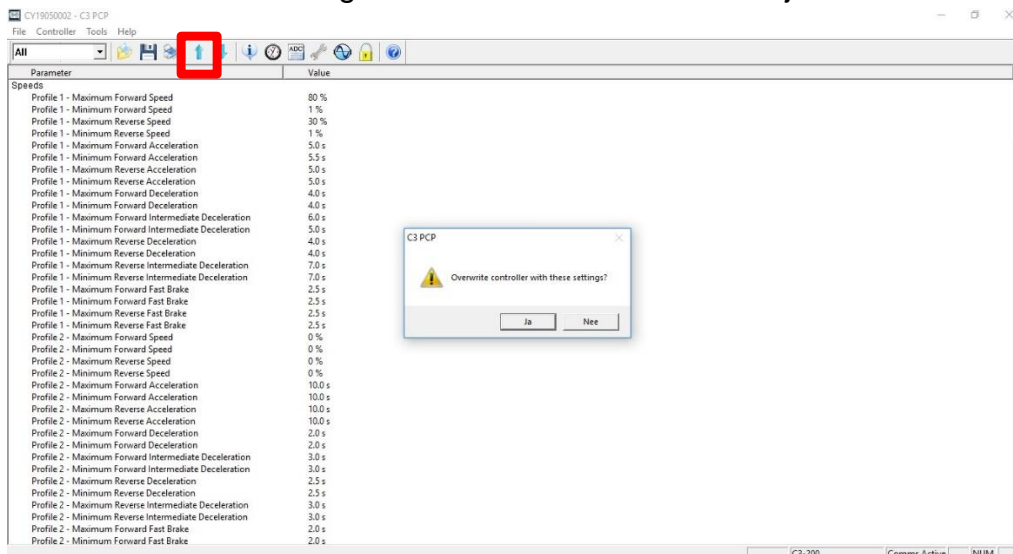

De C3 controller beschikt nu over de laatst geprogrammeerde waarden.

**Tip!** Sla het gewijzigde programma op een USB stick op. Hierdoor is het mogelijk om hetzelfde programma op andere Virto's te zetten.